


ULTF-C74i

CONGELADOR ULT HORIZONTAL

El diseño del congelador horizontal es una opción económica que conserva bien el frío gracias a la tapa horizontal.

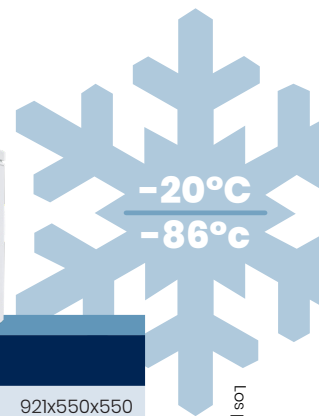

Los productos están sujetos a cambios debido a mejoras y desarrollo continuo. Vestfrost Solutions se reserva el derecho de modificar cualquier información, sin previo aviso.

DIMENSIONES

Dimensiones Exteriores (AlxAnxPr), mm	921x550x550
Dimensiones Interiores (AlxAnxPr), mm	450x390x390
Weight Gross/Net, kg	74 / 50
Material inner cabinet	Acero Pintado
Material outer cabinet	Acero Pintado
Peso del embalaje, kg	24
Dimensiones del embalaje (AlxAnxPr), mm	1008x705x795
Espesor del aislamiento	80
Tipo de aislamiento	Poliuretano con Ciclopentano
Movilidad	Estándar: 4 ruedas con frenos
Refrigerante, Tipo / gramos	Nature R2 / 121
Compresor de Velocidad Variable	No
Distribución de aire interna (tipo de)	Estático
Número de sondas	1

CONTROLADOR

Controlador	i-Care, Pantalla táctil
Idioma del controlador	EN, DE, FR
Conexión USB	Sí
Registro de datos	Datos, Alarmas y Eventos
Gráfico de temperatura	Sí
Alarma de temperatura alta/baja	Sí
Alarma de puerta abierta	No
Alarma de fallo de sonda	Sí
Alarma de fallo de energía	Sí

ALMACENAMIENTO

Volumen, Bruto/Neto, L	74 / 71
Capacidad de Cryoboxes "2	40
Capacidad de viales de 2 ml	4.00
Tapas interiores	Sí

CARACTERÍSTICAS

Cerradura	Sí
Luz LED	No
Respaldo de Batería para el Controlador, 24h	Sí
VIP (Panel Aislado al Vacío)	No
Calentador de marco de puerta	No
Mirilla	Sí - Ø 12,5 mm
Contacto seco	Sí
Válvula de vacío	No
Puerta	Sólido

ULTF-C74i

CONGELADOR ULT HORIZONTAL

El diseño del congelador horizontal es una opción económica que conserva bien el frío gracias a la tapa horizontal.

RENDIMIENTO		
Todos los datos en RT20°C		
Rango de temperatura	°C	-20 a -86
Uniformidad en el rendimiento - diferencia entre la parte superior e inferior	°C	+/- 0,9
Tiempo de enfriamiento	Minutos	72min a -75°C
Tiempo de retención	Minutos	64 min a -60°C
Ruido	dB	54
Modo de ahorro de energía	kWh/24h	4,018 kWh/24h a -70
Consumo de energía, kWh / 24h	kWh/24h	5,325 kWh/24h a -82
Energía anual	kWh/año	1943,25 kWh/año a -82°C
Consumo instantáneo de energía	kW	PD 0,540-0,370/Estable 0,340
Rechazo de calor*	W	250
Valor U	W/m² K	0,19
COMPONENTES DE REFRIGERACIÓN		
Refrigerante/Cantidad (gramos)		Nature R 2/121gr
Número de compresores	piezas	1
Compresor de velocidad variable	Sí/No	No
Distribución de aire interna (tipo de)		Estático
Ventilador del evaporador	Sí/No/Variable	No
Ventilador del condensador	Sí/No/Variable	Sí
Número de sondas	piezas	1
Descongelación	Sí/No	No




* La rechazo de calor se define como la potencia media basada en el consumo de energía, redondeada a los 50W más cercanos.

Los productos están sujetos a cambios debido a mejoras y desarrollo continuo. Vestfrost Solutions se reserva el derecho de modificar cualquier información, sin previo aviso.

ULTF-C74i


CONGELADOR ULT HORIZONTAL

El diseño del congelador horizontal es una opción económica que conserva bien el frío gracias a la tapa horizontal.

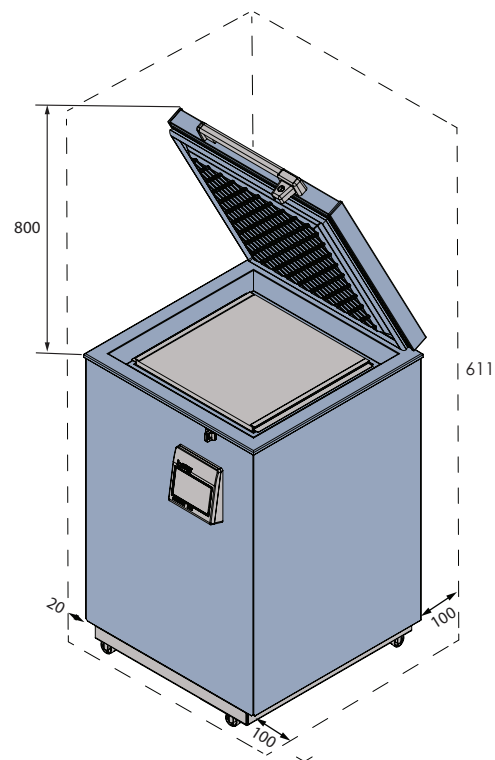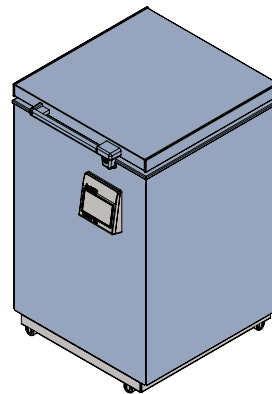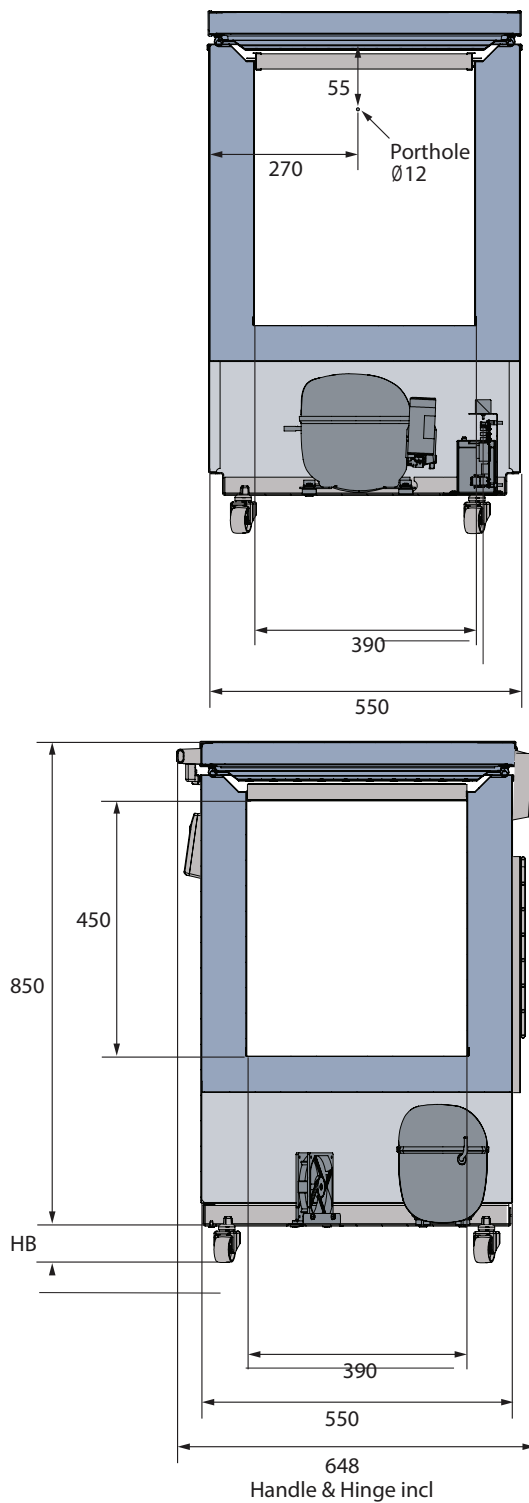

Todas las medidas en mm

HB: Altura de la base
(HB es ajustable cuando el valor dado es xx-xx)

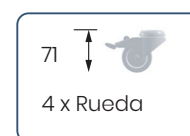

Los productos están sujetos a cambios debido a mejoras y desarrollo continuo. Vestfrost Solutions se reserva el derecho de modificar cualquier información, sin previo aviso

Actualizado 05/2025

ULTF-C74i

CONGELADOR ULT HORIZONTAL

El diseño del congelador horizontal es una opción económica que conserva bien el frío gracias a la tapa horizontal.

POSICIÓN DEL SENSOR

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

MODELO

ULTF-C74I

Tipo de prueba

Entorno de prueba

Temperatura ambiente

Humedad

Punto de ajuste

Sensor utilizado

Instalación

Refrigerante

Prueba de 10-punto

Condiciones controladas, gabinete vacío

20°C

60%

-82°C

25gr de latón estañado formado como un cilindro con un diámetro de 15,2 mm

Aparato instalado según las condiciones del manual de instrucciones

Nature R 2

TEMPERATURA DEL SENSOR

Posición del sensor	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
Máx.	-83,9	-85,3	-85,2	-84,9	-85,6	-85	-85	-84,5	-85	-84,6
Prom.	-84,5	-85,9	-85,8	-85,5	-86,2	-85,6	-85,5	-85	-85,6	-85,1
Mín.	-85,1	-86,5	-86,2	-86,2	-86,9	-86,3	-86,3	-85,6	-86,3	-85,7

CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO

OPERACIÓN CÍCLICA

RENDIMIENTO TÍPICO EN AMBIENTE 20°C – GABINETE VACÍO

Temperatura promedio del gabinete	-85,5°C
Variación máxima del punto de ajuste	+/- 0,9°C
Estabilidad en promedio	1,0°C
Recuperación de 1 min. con la puerta abierta a -75°C temperatura promedio	6 min.
Tasa de ciclo encendido/apagado	16 / 7 min.
Ciclo de trabajo	68%
Consumo de energía - Modo normal	5,32 kWh/día
Consumo de energía - Modo de ahorro de energía	4,01 kWh/día
Tiempo de enfriamiento a -75°C temperatura promedio	72 min.
Tiempo de retención de -82°C a -60°C	64 min.
Rechazo de calor	370 W

Los productos están sujetos a cambios debido a mejoras y desarrollo continuo. Vestfrost Solutions se reserva el derecho de modificar cualquier información, sin previo aviso.