

R-138i

REFRIGERADOR BIOMÉDICO

Con un diseño compacto, este congelador bajo mostrador se ajusta perfectamente debajo de tu banco de trabajo, proporcionando una solución de almacenamiento ideal para lugares donde el espacio es limitado.



+2°C
+20°C

Los productos están sujetos a cambios debido a mejoras y desarrollo continuo. Vestfrost Solutions se reserva el derecho de modificar cualquier información, sin previo aviso.

DIMENSIONES

Dimensiones Exteriores (AlxAnxPr), mm	825x595x642
Dimensiones Interiores (AlxAnxPr), mm	676x475x495
Weight Gross/Net, kg	56 / 45
Material inner cabinet	ABS
Material outer cabinet	Acero Pintado
Peso del embalaje, kg	11
Dimensiones del embalaje (AlxAnxPr), mm	1037x710x650
Espesor del aislamiento	50
Tipo de aislamiento	Poliuretano con Ciclopentano
Distribución de Aire	Dinámico
Movilidad	Estándar: Patas Ajustables - Opción: Ruedas
Refrigerante, Tipo / gramos	R600a / 47
Compresor de Velocidad Variable	Sí - Tecnología de Enfriamiento Adaptativo
Número de sondas	4

CONTROLADOR

Controlador	i-Care, Pantalla táctil
Idioma del controlador	EN, DE, FR
Conexión USB	Sí
Registro de datos	Datos, Alarmas y Eventos
Gráfico de temperatura	Sí
Alarma de temperatura alta/baja	Sí
Alarma de puerta abierta	Sí
Alarma de fallo de sonda	Sí
Alarma de fallo de energía	Sí

ALMACENAMIENTO

Volumen, Bruto/Neto, L	138 / 117
Estantes, Completos/Medios	2 / 1
Material del estante	Acero inoxidable perforado

CARACTERÍSTICAS

Cerradura	Sí
Luz LED	Sí
Respaldo de Batería para el Controlador, 24h	Sí
Termostato de seguridad	Sí
Mirilla	Sí - Ø 20 mm
Contacto seco	Sí
Botella de referencia	Sí
Puerta	Sólido
Características de la puerta	Automático: Cierre < 90° - Mantener cierre > 90°
Reversibilidad de la puerta	Sí

R-138i

REFRIGERADOR BIOMÉDICO

Con un diseño compacto, este congelador bajo mostrador se ajusta perfectamente debajo de tu banco de trabajo, proporcionando una solución de almacenamiento ideal para lugares donde el espacio es limitado.

ESPECIFICACIONES		
Voltaje/Frecuencia	Voltaje/Hz	230V/50-60Hz
Máxima Temperatura Ambiente	°C	35°C
Máxima Humedad	% rh	75%
RENDIMIENTO		
Todos los datos en RT20°C		
Rango de temperatura	°C	2 a 20
Uniformidad en el rendimiento - diferencia entre la parte superior e inferior	°C	+/- 0,4
Tiempo de enfriamiento	Minutos	30 min a 6°C
Tiempo de retención	Minutos	108 min a 10°C
Ruido	dB	44
Consumo de energía, kWh / 24h	kWh/24h	0,334 kWh/24h a 5°C
Energía anual	kWh/añual	121,9 kWh/a 5°
Consumo instantáneo de energía	kW	PD 0,080/Estable 0,025
Rechazo de calor*	W	50
Valor U	W/m ² K	0,59
COMPONENTES DE REFRIGERACIÓN		
Refrigerante/Cantidad (gramos)		R600a/47gr
Número de compresores	piezas	1
Compresor de velocidad variable	Sí/No	Sí
Distribución de aire interna (tipo de)		Corriente de aire dual
Ventilador del evaporador	Sí/No/Variable	Sí
Ventilador del condensador	Sí/No/Variable	No
Número de sondas	piezas	4
Descongelación	Sí/No	Sí - automático
CARACTERÍSTICAS		
Termostato de seguridad	sí/no/opcional	Sí
Cerradura	sí/no	Sí
Luz LED	sí/no	Sí
Respaldo de Batería para el Controlador	sí/no/opcional	Sí - 24h
Mirilla	sí/no - Ømm	Sí - Ø 20mm
Contacto seco	sí/no	Sí
Ruedas	sí/no/opcional	Opcional
Puerta	vidrio/sólido	Sólido
Botella de referencia	sí/no/opcional	Sí
Cierre de la puerta	sí/no/opcional	Sí
Reversibilidad de la puerta	sí/no	Sí
Mantener automático a 90°C	sí/no	Sí
Ventilación al vacío + VIP (Panel al vacío)	sí/no	No



* La rechazo de calor se define como la potencia media basada en el consumo de energía, redondeada a los 50W más cercanos.

Los productos están sujetos a cambios debido a mejoras y desarrollo continuo. Vestfrost Solutions se reserva el derecho de modificar cualquier información, sin previo aviso.

R-138i



REFRIGERADOR BIOMÉDICO

Con un diseño compacto, este congelador bajo mostrador se ajusta perfectamente debajo de tu banco de trabajo, proporcionando una solución de almacenamiento ideal para lugares donde el espacio es limitado.

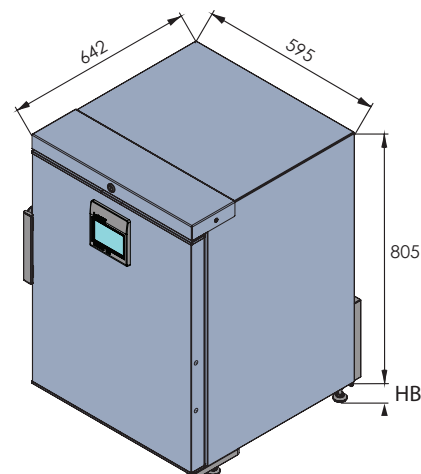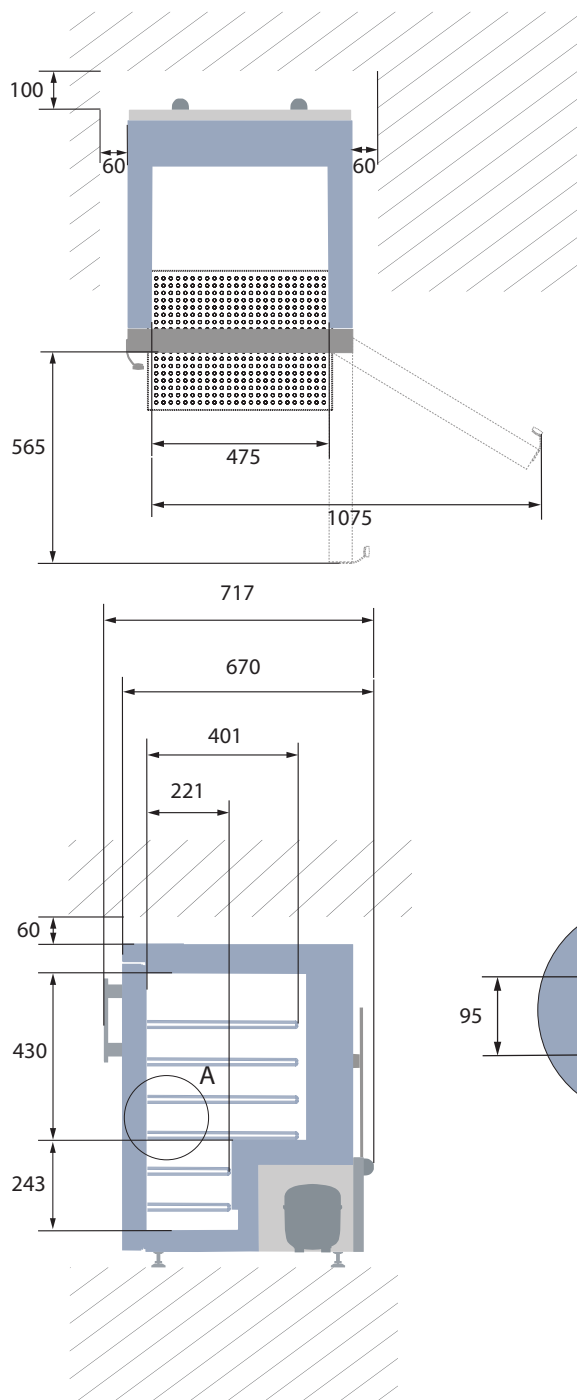

Todas las medidas en mm

HB: Altura de la base
(HB es ajustable cuando el valor dado es xx-xx)

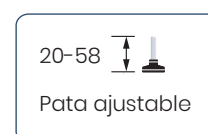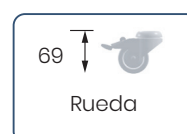


R-138i

REFRIGERADOR BIOMÉDICO


Con un diseño compacto, este congelador bajo mostrador se ajusta perfectamente debajo de tu banco de trabajo, proporcionando una solución de almacenamiento ideal para lugares donde el espacio es limitado.

POSICIÓN DEL SENSOR

VISTA FRONTAL

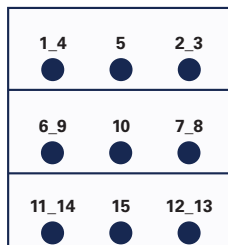

VISTA SUPERIOR

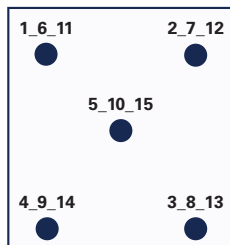

MODELO

R-138i



Tipo de prueba	Prueba de 15-punto
Entorno de prueba	Condiciones controladas, gabinete vacío
Temperatura ambiente	20°C
Humedad	60%
Punto de ajuste	5°C
Sensor utilizado	25gr de latón estañado formado como un cilindro con un diámetro de 15,2 mm
Instalación	Aparato instalado según las condiciones del manual de instrucciones
Refrigerante	R600a

TEMPERATURA DEL SENSOR

Posición del sensor	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
Máx	5,2	5	5,1	5,6	5,1	5	4,8	5,1	5,3	5	5	4,8	5,2	5,1	4,8
Prom.	5	4,9	5	5,4	5	4,9	4,7	4,9	5,1	4,9	4,9	4,6	4,8	4,9	4,6
Mín.	4,9	4,8	4,9	5,3	4,8	4,7	4,6	4,7	5	4,7	4,7	4,4	4,6	4,8	4,4

CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO

OPERACIÓN CÍCLICA

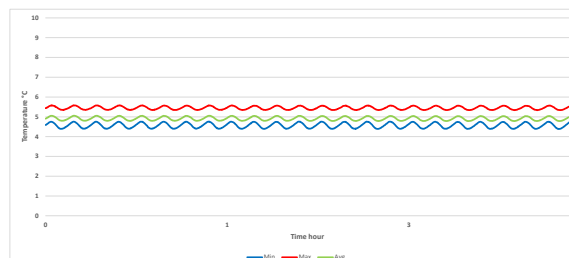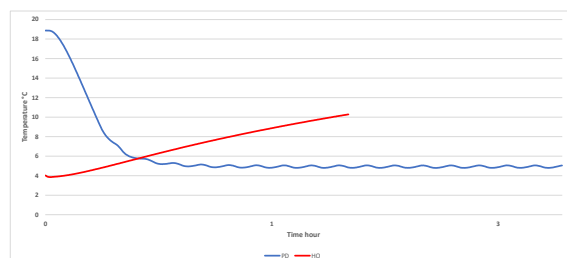

RENDIMIENTO TÍPICO EN AMBIENTE 20°C – GABINETE VACÍO

Temperatura promedio del gabinete	4,9°C
Uniformidad	+/- 0,4°C
Estabilidad en promedio	0,1°C
Recuperación de 1 min. con la puerta abierta a 6°C Temperatura promedio	8 min.
Tasa de ciclo encendido/apagado	4 / 6,5 min.
Ciclo de trabajo	37,9%
Consumo de energía	0,33 kWh/día
Tiempo de enfriamiento a 6°C temperatura promedio	30 min.
Tiempo de retención de 5°C a 10°C	108 min.
La temperatura de la muestra no excede	8°C
Rechazo de calor	46 W

Los productos están sujetos a cambios debido a mejoras y desarrollo continuo. Vestfrost Solutions se reserva el derecho de modificar cualquier información, sin previo aviso.