

ULTF-51i

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ULT

Multi voltaje



-20°C
-86°C

DIMENSIONES

Dimensiones Exteriores (AlxAnxPr), mm	836x699x720
Profundidad incl. manija de la puerta	790
Dimensiones Interiores (AlxAnxPr), mm	310x360x445
Peso Bruto/Neto, kg	108 / 82
Material del gabinete interior	Acero Inoxidable
Material del gabinete exterior	Acero Pintado
Peso del embalaje, kg	26
Dimensiones del embalaje (AlxAnxPr), mm	1050x750x850
Espesor del aislamiento	120
Tipo de aislamiento	Poliuretano con Ciclopentano
Movilidad	2 x Patas Ajustables, 2 x Ruedas
Refrigerante, Tipo / gramos	Nature R 2/99gr

CARACTERÍSTICAS

Cerradura	☒
Luz LED	☐
Respaldo de Batería para el Controlador	☒
Mirilla	☒
Tamaño de la mirilla	20 mm
Contacto seco	☒
Reversibilidad de la puerta	☐
Válvula de vacío	☒
VIP (Panel al vacío)	☒

ALMACENAMIENTO

Capacidad	50
-----------	----

ALARMAS

Alta / Baja temperatura	☒
Puerta abierta	☒
Fallo de energía	☒
Fallo de sonda	☒

REFRIGERACIÓN

Refrigerante	Nature R
Ruido	< 48
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Rango de temperatura	-20 / -86
Condición ambiental	25 °C

Los productos están sujetos a cambios debido a mejoras y desarrollo continuo. Vestfrost Solutions se reserva el derecho de modificar cualquier información, sin previo aviso

ULTF-51i

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ULT

Multi voltaje

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Voltaje/Frecuencia	Voltaje/Hz	100-240 V, 50/60Hz
Máxima Temperatura Ambiente	°C	32
Máxima Humedad	% rh	65
RENDIMIENTO		
Todos los datos en RT20°C		
Rango de temperatura	°C	-20 a -86
Uniformidad en el rendimiento - diferencia entre la parte superior e inferior	°C	+/- 2,5
Tiempo de enfriamiento	Minutos	90 min. a -75°C
Tiempo de retención	Minutos	N/A
Ruido	dB	< 48
Consumo de energía, kWh / 24h	kWh/24h	4,34 kWh/24h a -80
Energía anual	kWh/ anual	1584kWh/y a -80°C
Consumo instantáneo de energía	kW	PD 0,600/Estable 0,280
Rechazo de calor*	W	200
Valor U	W/m ² K	N/A
COMPONENTES DE REFRIGERACIÓN		
Refrigerante/Cantidad (gramos)		Nature R 2/99gr
Número de compresores	piezas	1
Compresor de velocidad variable	Si/No	Si
Distribución de aire interna (tipo de)		Estático
Ventilador del evaporad	Si/No/Variable	No
Ventilador del condensador	Si/No/Variable	Si
Número de sondas	piezas	2
Descongelación	Si/No	No
CONTROLADOR		
Controlador	Si/No/Variable	Si
Tipo de controlador		i-Care táctil
Conexión USB	Si/No	Si
Conexión de datos	USB	Si
Capacidades del controlador		Registro de datos y alarmas
Idiomas del controlador		EN, DE, FR
Curva de temperatura en el controlador	Si/No	Si

* La rechazo de calor se define como la potencia media basada en el consumo de energía, redondeada a los 50W más cercanos.

Los productos están sujetos a cambios debido a mejoras y desarrollo continuo. Vestfrost Solutions se reserva el derecho de modificar cualquier información, sin previo aviso


ULTF-51i

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ULT


Multi voltaje

POSICIÓN DEL SENSOR

VISTA FRONTAL

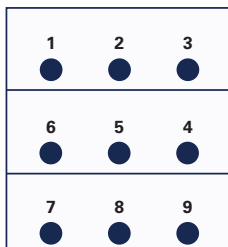

VISTA SUPERIOR

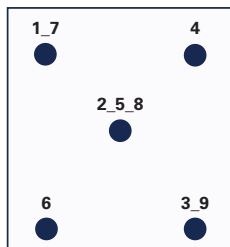

MODELO

ULTF-51i



Tipo de prueba	Prueba de 8-punto
Entorno de prueba	Condiciones controladas, gabinete vacío
Temperatura ambiente	25°C
Humedad	60%
Punto de ajuste	-82°C
Sensor utilizado	25gr de latón estañado formado como un cilindro con un diámetro de 15,2 mm
Instalación	Aparato instalado según las condiciones del manual de instrucciones
Refrigerante	Nature R

TEMPERATURA DEL SENSOR

Posición del sensor	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9										
Máx	-84,2	-84,8	-85,0	-82,8	-83,3	-83,4	-80,3	-80,5	-81,0										
Prom.	-83,3	-83,8	-84,0	-82,0	-82,5	-82,5	-79,4	-79,5	-80,0										
Mín.	-83,7	-84,2	-84,4	-82,3	-82,8	-82,8	-79,7	-79,9	-80,4										

CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO

OPERACIÓN CÍCLICA

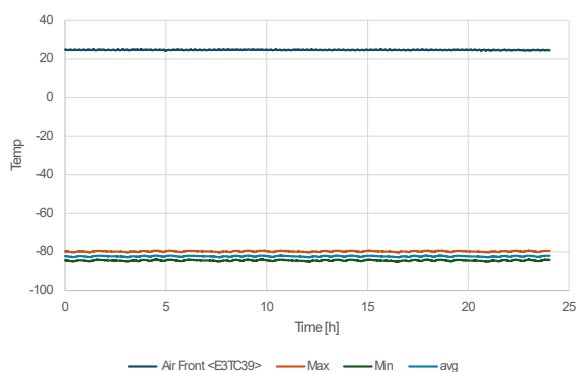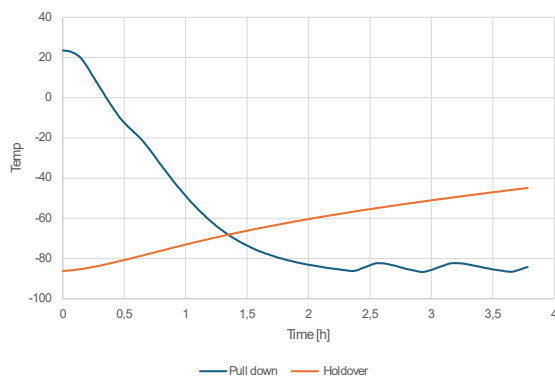

RENDIMIENTO TÍPICO EN AMBIENTE 25°C - GABINETE VACÍO

Temperatura promedio del gabinete a un punto de ajuste de -82 °C	-82,8°C
Uniformidad	+/- 2,5°C
Estabilidad	1,1°C
Recuperación a -75 °C tras 1 minuto con la puerta abierta	32 min.
Frecuencia de ciclos encendido/apagado a punto de ajuste de -82 °C	50/5 min./min.
Ciclo de trabajo a punto de ajuste de -82 °C	90%
Consumo de energía	4,35 kWh/día
Tiempo de descenso hasta una temperatura promedio de -75 °C	103 min.
Tiempo de mantenimiento desde un promedio de -82 °C hasta -60 °C	102 min.
Rechazo de calor	200 W

Los productos están sujetos a cambios debido a mejoras y desarrollo continuo. Vestfrost Solutions se reserva el derecho de modificar cualquier información, sin previo aviso.

Actualizado 06/2025