

R-350 ESSENTIAL

GRANDE CAPACITÉ ET FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

 **MODE ÉCO DISPONIBLE**



Une fonction ECO intégrée, associée au système de refroidissement optimisé et aux réfrigérants hydrocarbures, permet d'économiser de l'énergie et de réduire votre empreinte carbone. La lumière LED intégrée dans le cadre de la porte offre une exposition complète du contenu stocké tout en maintenant un faible coût de fonctionnement. Les étagères en verre flexibles et robustes peuvent facilement être ajustées pour s'adapter à vos produits.



+2°C
+10°C

Les produits sont susceptibles de changer en raison d'améliorations et de développements continus. Vestfrost Solutions se réserve le droit de modifier toute information, sans préavis.

DIMENSIONS

Dimensions extérieures HxLxP, mm	1860x595x595
Dimensions intérieures HxLxP, mm	1550x500x415
Poids brut/net, kg	81 / 79
Matériau de l'armoire intérieure	Blanc/PS
Matériau de l'armoire extérieure	Acier peint
Poids de l'emballage, kg	2
Dimensions de l'emballage HxLxP, mm	1925x636x671
Épaisseur de l'isolation	42
Type d'isolation	Polyuréthane avec cyclopentane
Mobilité	2 pieds avant, 2 roues arrière
Réfrigérant, Type / gramme	R600a / 50g

CONTRÔLEUR

Contrôleur	Danfoss
Langue du contrôleur	Pas de langue - seulement 3 chiffres
Connexion USB	Non
Enregistrement	Non
Graphique de température	Non
Alarme de température haute/basse	Oui
Alarme de porte ouverte	Oui
Alarme de défaillance de sonde	Oui

STOCKAGE

Volume, Brut/Net, L	350 / 255
SPOR Pleine longueur demi longueur	21 Pleines / 2 Demi
Étagères Pleine longueur demi longueur	5 Pleines / 1 Demi
Chargement maximal pr. Étagère, kg	20 / 11
Type d'étagère	Acier inoxydable perforé

CARACTÉRISTIQUES

Serrure	Oui
Bac de dégivrage	Non
Couleur/type de couvercle	Verre
Lumière à l'intérieur du couvercle	Oui
Couleur de l'armoire	Blanc
Couleur/matériau intérieur	Blanc/PS
Affichage électronique	Oui

R-350 ESSENTIAL

GRANDE CAPACITÉ ET
FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

 MODE ÉCO DISPONIBLE

Tension/Fréquence		
Tension/Hz		230V/50Hz
Température ambiante maximale		
°C		32°C
Humidité maximale		
% rh		65%
PERFORMANCE		
Toutes les données à RT 20°C		
Plage de température		
°C		2 à 10
Uniformité des performances - différence entre le haut et le bas		
°C		+/- 0,8
Temps de descente		
Minutes		27 min à 6°C
Temps de maintien		
Minutes		69 min à 10°C
Bruit		
dB		45
Consommation d'énergie, kWh / 24h		
kWh/24h		0,962 kWh/24h réglé à 5°C
Énergie annuelle		
kWh/annuelle		351kWh/y réglé à 5°C
Classe énergétique		
		B
Consommation instantanée d'énergie		
kW		PD 0,18/ Stabilité 0,16
Rejet de chaleur*		
W		50
Valeur U		
W/m ² K		-
COMPOSANTS DE REFROIDISSEMENT		
Réfrigérant/Quantité (gramme)		
		R600a/50gr
Nombre de compresseurs		
pcs		1
Compresseur à vitesse variable		
Oui/Non		No
Distribution d'air interne (type de)		
		Flux d'air double
Ventilateur de l'évaporateur		
Oui/Non/Variable		Oui
Ventilateur du condenseur		
Oui/Non/Variable		Non
Nombre de sondes		
pcs		2
Dégivrage		
Oui/Non		Oui - automatique
CARACTÉRISTIQUES		
Thermostat de sécurité		
o/n/optionnel		Non
Serrure		
o/n		Oui
Lumière LED		
o/n		Oui
Batterie de secours pour contrôleur		
o/n/optionnel		Non
Hublot		
o/n - Ømm		Oui - Ø 12,7mm
Contact sec		
o/n		Non
Roulettes		
o/n/optionnel		Optionnel
Porte		
verre/solide		Verre
Bouteille de référence		
o/n/optionnel		Non
Fermeture de la porte		
o/n/optionnel		Oui
Réversibilité de la porte		
o/n		Oui
Maintien automatique à 90°C		
o/n		Non
Ventilateur sous vide + VIP (Panneau sous vide)		
o/n		Non
Connexion Bluetooth		
o/n		Oui

* La rejet de chaleur est défini comme la puissance moyenne basée sur la consommation d'énergie, arrondie à la cinquantaine de watts la plus proche.


Les produits sont susceptibles de changer en raison d'améliorations et de développements continus. Vestfrost Solutions se réserve le droit de modifier toute information, sans préavis.

Mis à jour 07/2025

R-350 ESSENTIAL

GRANDE CAPACITÉ ET
FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

 MODE ÉCO DISPONIBLE

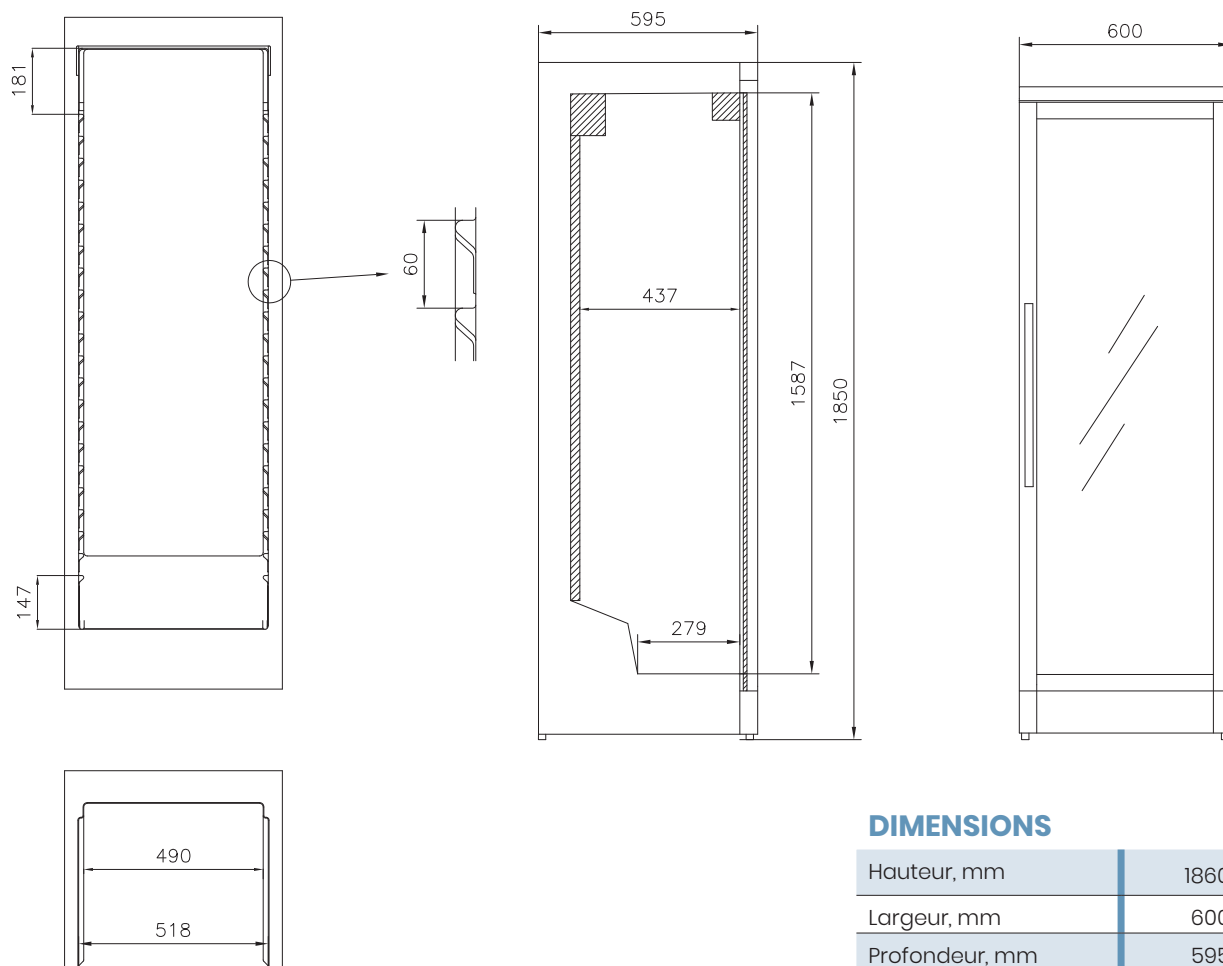

DIMENSIONS

Hauteur, mm	1860
Largeur, mm	600
Profondeur, mm	595
Profondeur incl. poignée, mm	640
Profondeur incl. porte ouverte, mm	1180

Toutes les mesures en mm

Les produits sont susceptibles de changer en raison d'améliorations et de développements continus. Vestfrost Solutions se réserve le droit de modifier toute information, sans préavis.



R-350 ESSENTIAL

GRANDE CAPACITÉ ET
FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

MODE ÉCO DISPONIBLE

POSITION DU CAPTEUR		MODÈLE	R-350 ESSENTIAL
VUE DE FACE	VUE DE DESSUS	Environnement de test	Conditions contrôlées, armoire vide
		Capteur utilisé	25 gr laiton étamé formé en cylindre avec un diamètre de 15,2 mm
		Installation	Appareil installé selon les conditions du manuel d'instructions
		Réfrigérant	R600a

TEMPÉRATURE DU CAPTEUR															
Position du capteur	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
Max	4,1	4	4,5	4,6	4,2	3,2	3,2	3,7	4,1	3,5	4,6	3,5	3,9	4	3,8
Moy.	5,5	5,4	5,3	5,8	5,5	4,9	5,2	5,2	5,5	5,1	5,3	5	5,3	5	4,8
Min.	3	2,9	3,8	3,8	3,3	2	1,6	2,5	3,1	2,5	4,1	2,5	2,8	3,4	3,1
CHAUFFAGE & REFROIDISSEMENT								FONCTIONNEMENT CYCLIQUE							

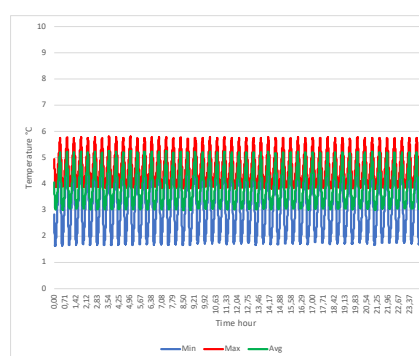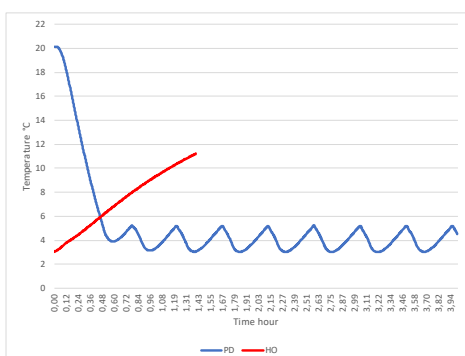

PERFORMANCE TYPIQUE À 20°C AMBIANT – ARMOIRE VIDE	
Température moyenne de l'armoire à 5°C réglée	3,9°C
Uniformité	+/- 1,4°C
Stabilité	2,2°C
Récupération en 1 min. après ouverture de la porte à 6°C	6 min.
Taux de cycle marche/arrêt	7 / 22 min.
Cycle de service	23%
Consommation d'énergie	0,962 kWh/jour
Temps de descente à 6°C	27 min.
Temps de maintien de la moyenne à 10°C	69 min.
Rejet de chaleur	- W
Valeur U	- W/m²*K
Bruit	45 dB

Les produits sont susceptibles de changer en raison d'améliorations et de développements continus. Vestfrost Solutions se réserve le droit de modifier toute information, sans préavis.

Mis à jour 07/2025