

ULTF-91i

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ULT

Multi tension

**-20°C**
-86°C

Les produits sont susceptibles de changer en raison d'améliorations et de développements continus. Vestfrost Solutions se réserve le droit de modifier toute information, sans préavis.

DIMENSIONS

Dimensions extérieures HxLxP, mm	836x947x720
Profondeur incl. poignée de porte	790
Dimensions intérieures HxLxP, mm	310x640x445
Poids brut/net, kg	137 / 102
Matériau de l'armoire intérieure	Acier inoxydable
Matériau de l'armoire extérieure	Acier peint
Poids de l'emballage, kg	35
Dimensions de l'emballage HxLxP, mm	1030x1040x850
Épaisseur de l'isolation	120
Type d'isolation	Polyuréthane avec cyclopentane
Mobilité	3 x Pieds réglables, 3 x Roulettes
Réfrigérant, Type / gramme	Nature R 2/149gr

CARACTÉRISTIQUES

Serrure	<input checked="" type="checkbox"/>
Lumière LED	<input type="checkbox"/>
Batterie de secours pour contrôleur	<input checked="" type="checkbox"/>
Hublot	<input checked="" type="checkbox"/>
Taille du hublot	20 mm
Contact sec	<input checked="" type="checkbox"/>
Réversibilité de la porte	<input type="checkbox"/>
Valve à vide	<input checked="" type="checkbox"/>
VIP (Panneau sous vide)	<input checked="" type="checkbox"/>

STOCKAGE

Capacité	88
----------	----

ALARMES

Haute / Basse température	<input checked="" type="checkbox"/>
Porte ouverte	<input checked="" type="checkbox"/>
Panne de courant	<input checked="" type="checkbox"/>
Défaillance de la sonde	<input checked="" type="checkbox"/>

REFROIDISSEMENT

Réfrigérant	Nature R
Bruit	< 48
Tension	100-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Plage de température	-20 / -86
Condition ambiante	25 °C

ULTF-91i

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ULT

Multi tension

Tension/Fréquence	Tension/Hz	100-240 V, 50/60Hz
Température ambiante maximale	°C	32
Humidité maximale	% rh	65
PERFORMANCE		
Toutes les données à RT 20°C		
Plage de température	°C	-20 à -86
Uniformité des performances - différence entre le haut et le bas	°C	+/- 2,5
Temps de descente	Minutes	103 min. à -75°C
Temps de maintien	Minutes	N/A
Bruit	dB	< 48
Consommation d'énergie, kWh / 24h	kWh/24h	5,22 kWh/24h réglé à -80°C
Énergie annuelle	kWh/annuelle	1905kWh/y réglé à -80°C
Consommation instantanée d'énergie	kW	PD 0,650/Stabilité 0,280
Rejet de chaleur*	W	250
Valeur U	W/m ² K	N/A
COMPOSANTS DE REFROIDISSEMENT		
Réfrigérant/Quantité (gramme)		Nature R 2/149gr
Nombre de compresseurs	pcs	1
Compresseur à vitesse variable	Oui/Non	Oui
Distribution d'air interne (type de)		Statique
Ventilateur de l'évaporateur	Oui/Non/Variable	Non
Ventilateur du condenseur	Oui/Non/Variable	Oui
Nombre de sondes	pcs	2
Dégivrage	Oui/Non	Non
CONTRÔLEUR		
Contrôleur	Oui/Non/Variable	Oui
Type de contrôleur		i-Care tactile
Connexion USB	Oui/Non	Oui
Connexion de données	USB	Oui
Capacités du contrôleur		Enregistrement des données et alarmes
Langues du contrôleur		EN, DE, FR
Courbe de température dans le contrôleur	Oui/Non	Oui

* La rejet de chaleur est défini comme la puissance moyenne basée sur la consommation d'énergie, arrondie à la cinquantaine de watts la plus proche.

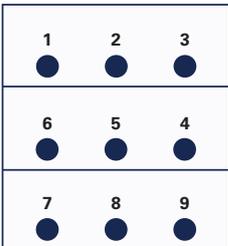
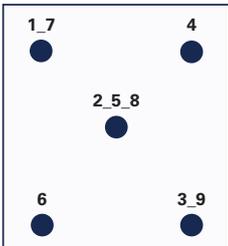
Les produits sont susceptibles de changer en raison d'améliorations et de développements continus. Vestfrost Solutions se réserve le droit de modifier toute information, sans préavis.

Mis à jour 06/2025

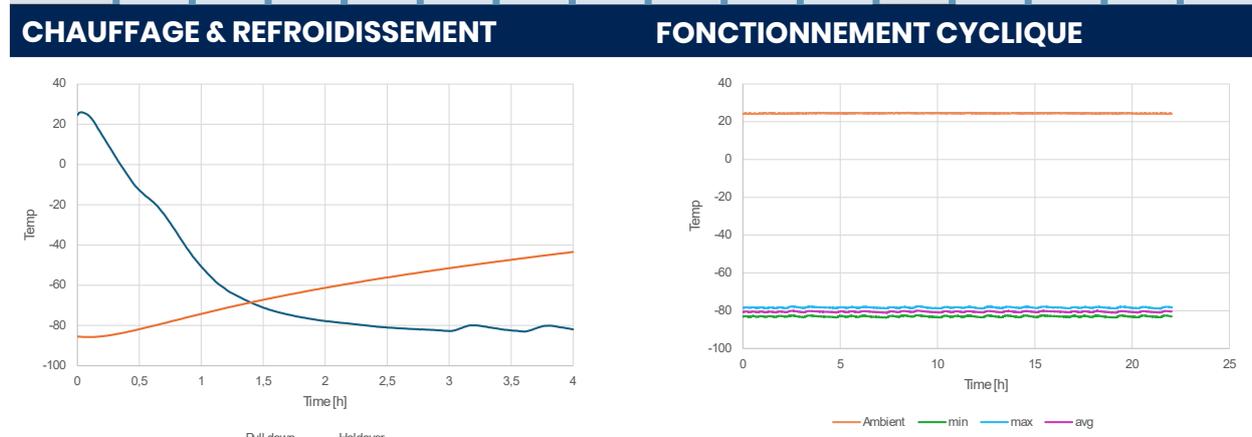
ULTF-91i

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ULT

Multi tension

POSITION DU CAPTEUR		MODÈLE	ULTF-91i
<p>VUE DE FACE</p> 		Type de test	Test de 8-point
<p>VUE DE DESSUS</p> 		Environnement de test	Conditions contrôlées, armoire vide
		Température ambiante	25°C
		Humidité	60%
		Point de consigne	-82°C
		Capteur utilisé	25 gr laiton étamé formé en cylindre avec un diamètre de 15,2 mm
		Installation	Appareil installé selon les conditions du manuel d'instructions
		Réfrigérant	Nature R

TEMPÉRATURE DU CAPTEUR										
Position du capteur	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	
Max	-78,8	-79,6	-79,8	-80,1	-80,5	-81,0	-83,1	-83,0	-83,6	
Moy.	-77,7	-78,4	-78,7	-78,9	-79,5	-80,1	-82,1	-81,8	-82,4	
Min.	-78,3	-79,1	-79,3	-79,5	-80,0	-80,6	-82,6	-82,4	-83,0	



PERFORMANCE TYPIQUE À 25°C AMBIANT – ARMOIRE VIDE	
Température moyenne de l'enceinte au point de consigne de -82 °C	-81,1°C
Uniformité	+/- 2,5°C
Stabilité	1,1°C
Rétablissement à -75 °C après 1 minute avec la porte ouverte	32 min.
Fréquence des cycles marche/arrêt au point de consigne de -82 °C	50/5 min./min.
Cycle de service au point de consigne de -82 °C	90%
Consommation d'énergie	5,22 kWh/ jour
Temps de descente jusqu'à une température moyenne de -75 °C	103 min.
Temps de maintien de -82 °C à -60 °C en moyenne	102 min.
Rejet de chaleur	250 W

Les produits sont susceptibles de changer en raison d'améliorations et de développements continus. Vestfrost Solutions se réserve le droit de modifier toute information, sans préavis.

Mis à jour 06/2025